

PHILIPS

miniRITE T R

HER9012DG



充電式耳かけ型補聴器

丸1日使えるパワー

内蔵充電式バッテリーと非接触充電システムを備えたフィリップス HeaLink は、最新式の便利な充電性能を提供。スマートデバイスからのストリーミングや急速充電など、そのパワーを1日中お楽しみいただけます。

SoundMap テクノロジー

- SoundMap ノイズコントロール
- SoundMap 増幅
- SoundMap フィードバックキャンセラー

SoundTie テクノロジー

- Made for iPhone[®]、iPad[®]、iPod[®]
- ワイヤレスアクセサリ
- 2.4 Ghz ワイヤレステクノロジー

特長

Made for iPhone®、iPad®、iPod®



フィリップス HearLink は「Made for iPhone®、iPad®、iPod®」補聴器です。これらのデバイスからフィリップス HearLink 補聴器にサウンドを直接ストリーミングできます。

SoundMap 増幅




内蔵ノイズ推定機能を備えた高度な圧縮スキームにより、会話を含め、今まで聞き取りづらかったあらゆる音声の明瞭さと可聴性を向上します。

SoundMap フィードバックキャンセラー



すばやく機能して、音響フィードバック（ハウリング）の初期段階の蓄積を検出し、打ち消すことのできる画期的なフィードバックキャンセラー。

SoundMap ノイズコントロール

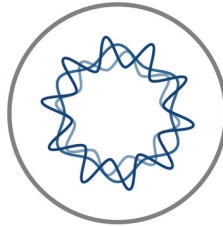

独自のツインマイクノイズ推定機能により、会話と雑音を正確に分離します。背景雑音を低減することにより、雑音の多い環境でも会話を聞き取りやすくします。

ワイヤレスアクセサリ



SoundTie テクノロジーは、遠く離れた場所にいる友人や家族、そしてお気に入りの音楽やエンターテインメントとあなたをつなぎます。フィリップス AudioClip で Android™ スマートフォンからの電話に出たり、フィリップス TV アダプターで高音質のサウンドシステムやテレビからサウンドをストリーミングすることができます。補聴器の音量やプログラムは、フィリップスリモコンまたはフィリップス HearLink アプリを使用すれば、周囲に気づかれずに変更することができます。

2.4 Ghz ワイヤレステクノロジー



2.4 Ghz Bluetooth® Low Energy により、最新の接続デバイスに直接ワイヤレス接続できます。

仕様

製品の説明

ダブルプッシュボタン: 音量およびプログラムの変更、ミュート、機内モード

テレコイル: 搭載

miniFit スピーカー: 4 種類のオプション（各種イヤピース付き）

コーティング: 疎水性

IP 等級: IP68

Bluetooth®: 2.4 GHz BLE

NFMI: 搭載

充電性能

動作時間: 最長 24.7 時間（使用状況により異なります）

充電時間: 3 時間で満充電

充電電池の種類: リチウムイオン電池

